

Giriş

Satın aldığınız için teşekkürler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak faydalanmak için www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirin.

Önemli güvenlik bilgisi

Ürünü sadece amacına uygun olarak kullanın. Ürünü, pillerini ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Uyarılar

- Yalnızca Philips WAA1001, WAA2001, UL veya (100 - 240V-; 50/60Hz; 3,5W) giriş değeri ve (5Vdc; 2,5W) çıkış değerine sahip eşdeğer güvenlik onaylı adaptörle şarj edin. Adaptör listesi için www.philips.com/support adresine bakın.
- Şarj cihazını sudan uzak tutun.
- USB şarj cihazını bağlamadan önce tutamağın tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihaz çocuklar, düşük fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel kapasitedeki veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmiş olması ve tehlikelerini anlamaları şartıyla kullanılabilir. Cihazın temizliği ve bakımı gözetim altında olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Çocuklar ürünle oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Yalnızca orijinal Philips aksesuarlarını veya sarf malzemelerini kullanın. Ürünle birlikte verilen USB şarj cihazını yalnızca UL (Sınıf 2) veya eşdeğer onaylı 5V DC adaptörle (IPX4 veya üstü) kullanın.
- Bu cihaz kullanıcı tarafından servis verilemeyen parçalar içerir. Cihaz hasar görürse kullanmayı durdurun ve ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin (bkz. 'Garanti ve Destek').
- Ürünü açık havada veya ısınmış yüzeylerin yakınında şarj etmeyin.

- Ürünün hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Bu cihaz sadece dişleri, diş etlerini ve dili süpürmek için tasarlanmıştır.
- Kullanımdan sonra aşırı kanama olursa 1 haftalık kullanımdan sonra kanama devam ederse veya rahatsızlık veya ağrı hissederseniz cihazı kullanmayı bırakın ve diş hekiminize/doktorunuza danışın.
- Son iki ayda ağız ya da diş eti cerrahisi işlemi geçirdiyse cihazı kullanmadan önce diş hekiminize danışın.
- Kalp piliniz ya da başka bir implant cihazınız mevcutsa bu cihazı kullanmadan önce doktorunuza ya da implant cihazın üreticisine danışın.
- Tıbbi endişeleriniz varsa bu cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Bu cihaz bir kişisel bakım cihazıdır ve bir diş muayenehanesinde veya kurumunda birden fazla hastada kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Ezilmiş ya da eğilmiş kılları olan fırça başlıklarını kullanmayı durdurun. Fırça başlığını her 3 ayda bir veya aşınma işaretleri belirirse daha önce değiştirin.
- Diş macununuz peroksit, kabartma tozu veya bikarbonat (beyazlatıcı diş macunlarında yaygındır) içeriyorsa her kullanımdan sonra fırça başlığını sabun ve suyla iyice temizleyin. Bu plastiğin muhtemel çatlamasını engeller.
- Yağlar veya hindistan cevizi yağı içeren ürünlerle doğrudan temastan kaçının. Temas fırça kıllarının yerinden çıkması ile sonuçlanabilir.
- Ürünü 32 °F / 0°C ile 104 °F / 40 °C arasındaki bir sıcaklıkta şarj edin, kullanın ve muhafaza edin.
- Ürünü ve pilleri ateşten uzak tutun ve doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Ürün anormal derecede ısınrsa veya koku yaparsa, rengi değişirse veya şarj işlemi normalden uzun sürerse, ürünü kullanmayı ve şarj etmeyi bırakın ve Philips ile iletişime geçin.
- Ürünü ve pillerini mikrodalga fırınlara veya induksiyon ocaklarına koymayın.

- Pillerin ısınmasını veya zehirli veya tehlikeli maddeler salmasını önlemek için ürünü veya pili açmayın, değiştirmeyin, delmeyin, hasar vermeyin veya sökmeyin. Pilleri kısa devre yaptırmayın, aşırı şarj etmeyin veya ters biçimde şarj etmeyin.
- Piller hasar gördüyse veya akıyorsa cilt veya gözle temasından kaçının. Böyle bir durumda, hemen suyla iyice yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlara maruz kalma konusundaki tüm uygulanabilir standartlar ve mevzuata uygundur.

Telsiz Cihazlar Direktifi

Philips işbu belge ile bir radyo frekansı arayüzü (Bluetooth veya BrushSync) ile donatılmış elektrikli diş fırçalarının Direktif No 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder.

- Bluetooth radyo frekansı: 2.4 GHz
- Maksimum Bluetooth radyo frekansı gücü: 3 dBm
- NFC radyo frekansı: 13.56 MHz
- Maksimum NFC radyo frekans gücü: 30.16 dBm

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki

internet adresinden ulaşılabilir:

www.philips.com/support

Kullanım amacı

3000 ve 4000 serisi elektrikli diş fırçaları, diş çürümelerini azaltmak, ağız sağlığını iyileştirmek ve korumak için dişlerdeki yapışan plaklar ile yiyecek artıklarını temizlemek üzere tasarlanmıştır. 3000 ve 4000 serisi elektrikli diş fırçaları tüketicilerin evde kullanımı için tasarlanmıştır. Çocuklar tarafından kullanımı yetişkin gözetiminde olmalıdır.

Philips Sonicare diş fırçası

- 1 Hijyenik seyahat kapağı
- 2 Fırça başlığı
- 3 Gövde
- 4 Açma/Kapama düğmesi
- 5 Fırça başlığını değiştirme hatırlatıcısı
- 6 Pil seviyesi göstergesi
- 7 USB şarj cihazı (duvar adaptörü dahil değil)

8 Seyahat çantası (yalnızca belirli modellerde)

Not: Duvar adaptörü dahil değildir. Yalnızca 5V adaptör (Tip A) kullanın.

Not: Fırça başlıkları değişiklik gösterebilir.

Başlarken

Fırça başlığı nın takılması



1 Fırça başlığını kıllar gövdenin ön tarafıyla aynı yönü gösterecek şekilde hizalayın.



2 Fırça başlığını yerine oturana kadar metal gövdenin üzerine sıkıca bastırın.

Not: Fırça başlığı ile gövde arasında hafif bir boşluk olması normaldir. Bu, fırça başlığının düzgün şekilde titremesini sağlar.

Philips Sonicare diş fırçasını şarj etme

- 1** USB şarj kablosunu elektrik prizine bağlı bir duvar adaptörüne takın.
- 2** Gövdeyi şarj cihazına yerleştirin.
 - Pil seviyesi göstergesinin ışığı yanar ve gövde iki kez bip sesi çıkarır. Bu, diş fırçasının şarj olduğunu gösterir.


Not: Pilin tamamen şarj olması 24 saate kadar sürebilir, ancak tamamen şarj olmadan önce Philips Sonicare diş fırçasınızı kullanabilirsiniz.

Philips Sonicare diş fırçasını kullanırken

Sonicare diş fırçasını ilk kez kullanıyorsanız, elektrikli olmayan bir diş fırçası kullanırken hissettiğinizden daha fazla titreşim hissetmeniz normaldir. Ürünü ilk kez kullananların çok fazla baskı uygulaması yaygın görülen bir durumdur. Sadece hafifçe bastırın ve diş fırçasının fırçalamayı sizin için yapmasına izin verin.

En iyi deneyim için lütfen aşağıdaki fırçalama talimatlarını takip edin. Yeni Sonicare elektrikli diş fırçanıza geçiş yapmanıza yardımcı olmak için, EasyStart özelliği açık olarak gelir. Bu özellik, Philips Sonicare diş fırçasıyla fırçalamaya uyum sağlamanıza yardımcı olmak için ilk 14 fırçalamada gücü hafifçe artırır.

Fırçalama talimatları

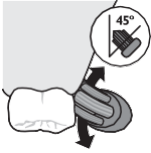

- 1 Kılları ıslatın ve az miktarda diş macunu uygulayın.
- 2 Diş fırçasının kıllarını dişlerinizin üzerine hafif bir açıyla (45 derece) yerleştirin, kılların diş eti çizgisine veya diş eti çizgisinin biraz altına ulaşması için hafifçe bastırın.

Not: Fırçanın orta kısmını her zaman dişlerle temas halinde tutun.

- 3 Philips Sonicare diş fırçasını açmak için açma/kapama düğmesine basın.
- 4 Kılları dişler ve diş eti çizgisi üzerine nazikçe yerleştirin. Dişlerinizi küçük ileri geri hareketlerle fırçalayın, böylece kıllar dişlerin arasına ulaşır. Fırçalama süreniz boyunca bu harekete devam edin.

Not: Kıllar hafif parlak olmalıdır. Manuel bir diş fırçasıyla olduğu gibi fırçalama yapmamanız önerilir.



- 5 Ön dişlerin iç yüzeylerini fırçalamak için fırçanın gövdesini yarı eğik biçimde eğin ve her diş üzerinde art arda birkaç kez dikey fırça darbesi uygulayın.

Not: Ağzınızın her kısmını eşit şekilde fırçaladığınızdan emin olmak için Quadpacer özelliğini kullanarak ağzınızı 4 bölüme ayırın (bkz. "Özellikler" bölümü).



- 6 Bölüm 1'de (üst dişlerin dış kısmı) fırçalamaya başlayın ve Bölüm 2'ye (üst dişlerin iç kısmı) geçmeden önce 30 saniye fırçalayın. Bölüm 3'te (alt dişlerin dış kısmı) fırçalamaya devam edin ve Bölüm 4'e (alt dişlerin iç kısmı) geçmeden önce 30 saniye fırçalayın.



- 7 Fırçalama döngüsünü tamamladıktan sonra dişlerinizin çiğneme yüzeylerini ve lekelenme olan bölgelerini fırçalamaya ek zaman ayırabilirsiniz. Dilerseniz diş fırçası açık veya kapalıyken dilinizi de fırçalayabilirsiniz.
- Philips Sonicare diş fırçası, düzgün bir şekilde uygulandıkları ve hasar görmedikleri takdirde diş telleri (fırça başlıkları diş telleri üzerinde kullanıldığında daha çabuk aşınır) ve diş restorasyonlarında (dolgular, kuronlar, kaplamalar) kullanım için güvenlidir. Bir sorun oluşursa lütfen bir diş hekimi ile görüşün.

Not: Philips Sonicare diş fırçası klinik çalışmalarda kullanıldığında gövde temiz modda, tam şarjlı ve EasyStart özelliği devre dışı bırakılmış olarak kullanılmalıdır.

Şarj etme ve pil durumu

- 1 USB şarj kablosunu bir duvar adaptörüne takın ve duvar adaptörünü bir elektrik prizine takın.
- 2 Gövdeyi şarj cihazına yerleştirin.

Not: Gövde şarj cihazına düzgün şekilde yerleştirildiğini ve şarj olduğunu doğrulamak için 2 kısa bip sesi çıkaracaktır.

Not: Bu Philips Sonicare diş fırçası, her biri 2 dakika süren (günde iki kez kullanılıyorsa 14 gün) en az 28 fırçalama seansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Pil seviyesi göstergesi, 2 dakikalık fırçalama seansını tamamladığınızda, gövdeyi duraklattığınızda veya şarj olurken pil durumunu gösterir.

Pil durumu (gövde şarj cihazına takılıyken)

Pil durumu	Pil göstergesi
Tam dolu	Sabit yeşil (30 saniye sonra söner)
Şarj etme	Yanıp sönen yeşil

Pil durumu (gövde şarj cihazına takılı değilken)

Pil durumu	Pil göstergesi	Ses
Tam dolu	Sabit yeşil	-
Kismen dolu	Yanıp sönen yeşil	-
Düşük	Yanıp sönen turuncu	3 bip sesi
Boş	Yanıp sönen turuncu	2 kez 5 bip sesi

Not: Enerji tasarrufu için pil ışığı kullanılmadığında kapanacaktır.

Not: Pil tamamen boşaldığında Philips Sonicare diş fırçası kapanır. Philips Sonicare diş fırçasını şarj etmek için şarj cihazına yerleştirin.

Not: Pili tamamen şarj olmuş durumda kullanmak için Philips Sonicare diş fırçasınızı kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazında tutabilirsiniz.

Özellikler

- Modlar (4000 serisi için)
- EasyStart
- Fırça başlığını değiştirme hatırlatıcısı
- Basınç sensörü
- Quadpacer
- SmarTimer

Modlar (4000 serisi için)

Elektrikli diş fırçasınız size hassas ve temiz modlar arasında seçim yapma seçeneği sunar.

Not: Diş fırçasını ilk kez kullandığınızda varsayılan ayar, hassas moddur.

Modları değiştirmek için:

- Diş fırçasını açmak için güç açma/kapama düğmesine bir kez basın.
- Modu değiştirmek için 2 saniye içinde ikinci kez basın.
- Durdurmak için 2 saniye içinde üçüncü kez basın. 2 saniye fırçaladıktan sonra güç düğmesine tekrar basmak da diş fırçasını duraklatacaktır.

EasyStart

Bu Philips Sonicare diş fırçası, EasyStart özelliği etkinleştirilmiş olarak gelir. EasyStart özelliği, Philips Sonicare diş fırçasıyla fırçalamaya uyum sağlamanıza yardımcı olmak için ilk 14 fırçalamada gücü hafifçe artırır.

EasyStart'ı devre dışı bırakmak için bkz. "Özellikleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma".


Fırça başlığını değiştirme hatırlatıcısı

Philips Sonicare cihazınız, fırça başlığınızın aşınmasını takip eden BrushSync teknolojisi ile donatılmıştır.

Not: Bu özellik yalnızca BrushSync teknolojisine sahip Philips Sonicare akıllı fırça başlıkları ile çalışır.

- 1 Yeni bir akıllı fırça başlığını ilk kez takarken sap, BrushSync teknolojisine sahip bir Philips fırça başlığına sahip olduğunuzu algılar ve fırça başlığı aşınmasını izlemeye başlar.
- 2 Zamanla, uyguladığınız basınca ve kullanılan süreye bağlı olarak gövde, fırça başlığınızı değiştirmek için en uygun zamanı belirlemek üzere fırça başlığı aşınmasını takip edecektir. Bu özellik, dişlerinize en iyi temizliği ve bakımı sunmanızı garantiler.
- 3 Fırça kafası değiştirme hatırlatıcı ışığı koyu sarı renkte yandığında fırça başlığınızı değiştirmelisiniz.

Fırça kafası değiştirme hatırlatıcısını devre dışı bırakmak için bkz. 'Özellikleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma'.

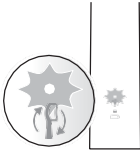

Basınç sensörü

Philips Sonicare cihazınız, fırçalarken uyguladığınız basıncı ölçen gelişmiş bir sensörle donatılmıştır. Çok fazla basıncı uygularsanız diş fırçasınız, uyguladığınız basıncı azaltmanız gerektiğini gösteren anlık bir geri bildirim verecektir. Bu geri bildirim, titreşimdeki ve dolayısıyla fırçalama hissi ve sesindeki bir değişikliklerle verilir. Ayrıca fırça kafası değiştirme hatırlatıcı ışığı koyu sarı renkte yanıp sönecektir.

Basınç sensörünü devre dışı bırakmak için bkz. "Özellikleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma".

Quadpacer



QuadPacer, kısa bir bip sesi çıkarıp cihazı durdurarak ağzınızın 4 bölümünü eşit ve düzgün biçimde fırçalamanızı hatırlatmak için zamanlayıcı işlevi sağlar. Bu Philips Sonicare diş fırçası, QuadPacer özelliği etkinleştirilmiş olarak gelir.

SmarTimer

SmarTimer, fırçalama döngüsünün sonunda diş fırçasını otomatik olarak kapatarak fırçalama döngünüzün tamamlandığını gösterir.

Diş uzmanları günde iki kez 2 dakikadan az olmamak üzere dişlerinizi fırçalamanızı önerir.

Fırçalama döngüsünü başlattıktan sonra açma/kapama düğmesine basarsanız, diş fırçası duraklayacaktır. 15 saniyelik bir duraklamadan sonra SmarTimer sıfırlanır.

Özellikleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Diş fırçasınızın aşağıdaki özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- EasyStart
- Fırça başlığını değiştirme hatırlatıcısı
- Basınç sensörü

Bu özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

EasyStart

- 1 Gövdeyi prize takılı şarj cihazına yerleştirin.
- 2 Gövde şarj cihazındayken güç açma/kapama düğmesini basılı tutun.
- 3 Tek bir kısa bip sesi duyana kadar (3 saniye sonra) açma/kapama düğmesini basılı tutun.
- 4 Güç açma/kapama düğmesine basmayı bırakın.

- Düşük-orta-yüksek biçimde üç ses, EasyStart özelliğinin etkinleştirildiği anlamına gelir. Etkinleştirmeyi onaylamak için pil seviyesi gösterge ışığı da 2 kez yeşil renkte yanıp sönecektir.
- Yüksek-orta-düşük biçimde üç ses, EasyStart özelliğinin devre dışı bırakıldığı anlamına gelir. Devre dışı bırakmayı onaylamak için pil seviyesi gösterge ışığı 1 kez koyu sarı renkte yanıp sönecektir.

Not: Klinik etkinliğe ulaşmak için EasyStart'ın devre dışı bırakılması gerekir.

Fırça başlığını değiştirme hatırlatıcısı

Not: Fırça başlığı değiştirme hatırlatıcısını yalnızca gövde üzerinde bir akıllı fırça başlığı varken etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Not: Yeni akıllı fırça başlıkları, fırça başlığı değiştirme hatırlatma özelliği etkinleştirilmiş olarak gelir.

- 1 Gövdeyi prize takılı şarj cihazına yerleştirin.
 - 2 Gövde şarj cihazındayken güç açma/kapama düğmesini basılı tutun.
 - 3 İki kısa bip sesi duyana kadar (5 saniye sonra) güç açma/kapama düğmesini basılı tutun.
 - 4 Güç açma/kapama düğmesine basmayı bırakın.
- Düşük-orta-yüksek üçlü tonu, fırça başlığı değiştirme hatırlatma özelliğinin etkinleştirildiği anlamına gelir. Etkinleştirmeyi onaylamak için pil seviyesi gösterge ışığı da 2 kez yeşil renkte yanıp sönecektir.
 - Yüksek-orta-düşük üçlü tonu, fırça başlığı değiştirme hatırlatma özelliğinin devre dışı bırakıldığı anlamına gelir. Devre dışı bırakmayı onaylamak için pil seviyesi gösterge ışığı 1 kez koyu sarı renkte yanıp sönecektir.

Basınç sensörü

- 1 Gövdeyi prize takılı şarj cihazına yerleştirin.
- 2 Gövde şarj cihazındayken güç açma/kapama düğmesini basılı tutun.
- 3 Üç kısa bip sesi duyana kadar (7 saniye sonra) güç açma/kapama düğmesini basılı tutun.
- 4 Güç açma/kapama düğmesine basmayı bırakın.

- Düşük-orta-yüksek biçimde üç ses, basınç sensörünün etkinleştirildiği anlamına gelir. Etkinleştirmeyi onaylamak için pil seviyesi gösterge ışığı da 2 kez yeşil renkte yanıp sönecektir.
- Yüksek-orta-düşük biçimde üç ses, basınç sensörünün devre dışı bırakıldığı anlamına gelir. Devre dışı bırakmayı onaylamak için pil seviyesi gösterge ışığı 1 kez koyu sarı renkte yanıp sönecektir.

Üç kısa bip sesinden sonra güç açma/kapama düğmesini basılı tutmaya devam ederseniz etkinleştirme/devre dışı bırakma sırası tekrarlanır.

Temizleme

Diş macunu ve diğer kalıntıları gidermek için Philips Sonicare diş fırçanızı düzenli olarak süpürmelisiniz. Philips Sonicare diş fırçanızın temizlenmemesi, ürünün hijyenik olmamasına ve ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Uyarı: Ürünü veya aksesuarları keskin nesnelere veya bulaşık makinesinde, mikrodalgada, kimyasallarla veya kaynar sıcak suda temizlemeyin.

Diş fırçası gövdesi




- 1 Fırçanın başlığını çıkarın ve metal gövde bölgesini ılık su ile durulayın. Fırça üzerindeki tüm diş macununun temizlendiğinden emin olun.

Dikkat: Metal gövde üzerindeki kauçuk contayı keskin nesnelere itmeyin, aksi takdirde hasar meydana gelebilir.

- 2 Tüm gövde yüzeyini nemli bir bezle silin.

Not: Fazla suyu akıtmak için gövdeyi lavaboya çarpmayın.

Fırça başlığı

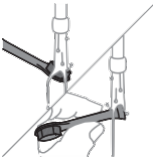

- 1 Her kullanımdan sonra fırça başlığını ve kılları durulayın.
- 2 Fırça başlığını gövdeden çıkarın ve fırça başlığı bağlantısını haftada en az bir kez ılık suyla yıkayın. Seyahat kapağını gereken sıklıkta yıkayın.

Şarj cihazı

- 1 Temizlemeden önce şarj cihazının fişini çekin.
- 2 Şarj cihazının yüzeyini nemli bir bezle silin.

Seyahat kabı

Ilık suyla durulayın ve seyahat kabının içini temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Saklama

Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız fişini prizden çekin, temizleyin ve (bkz. "Temizleme" bölümü) doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Değişim

Fırça başlığı

Optimum sonuç elde etmek için Philips Sonicare fırça başlıklarını her 3 ayda bir değiştirin. Yalnızca Philips Sonicare yedek fırça başlıklarını kullanın.

Model numarasını bulma

Model numarası (HX36XX) için Philips Sonicare diş fırçası gövdesinin altına bakın.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyacınız varsa lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin ya da uluslararası garanti belgesini okuyun.

Garanti kısıtlamaları

Uluslararası garanti koşulları aşağıdakileri kapsamaz:

- Fırça başlıkları.
- Onaylı olmayan değişen parçaların neden olduğu hasarlar.
- Yanlış kullanım, kötüye kullanım, ihmal, değişiklik veya yetkisiz onarımdan kaynaklanan hasarlar
- Çizikler, aşınmalar, renk bozulması veya solma dahil normal aşınma ve yıpranma

Geri dönüşüm



- Bu sembol, elektrikli ürünlerin ve pillerin normal evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiği anlamına gelir.
- Elektrikli ürünlerin ve pillerin ayrı toplanması için ülkenizdeki kurallarına uyun.

Dahili şarj edilebilir pilin çıkarılması

Ürün imha edildiğinde, dahili şarj edilebilir pil yetkili bir profesyonel tarafından çıkarılmalıdır. Pili çıkarmadan önce pilin tamamen boş olduğundan emin olun.

Ürünü açmak için kullanılacak aletleri kullanırken ve şarj edilebilir pili imha ederken gerekli tüm güvenlik önlemlerini alın. Gözlerinizi, ellerinizi, parmaklarınızı ve üzerinde çalıştığınız yüzeyi koruduğunuzdan emin olun.

Pilleri tutarken ellerinizin, ürünün ve pillerin kuru olduğundan emin olun.


Pillerin çıkarıldıktan sonra kazara kısa devre yapmasını önlemek için pillerin ucunun metal nesnelere (örn. bozuk para, saç tokası, yüzük) temas etmesine izin vermeyin. Pilleri alüminyum folyoya sarmayın. Pilleri atmadan önce pil uçlarını bantlayın veya pilleri plastik bir torbaya koyun.

Şarj edilebilir pilin çıkarılması


Pili çıkarmadan önce pilin tamamen boş olduğundan emin olun.

Şarj edilebilir pili çıkarmak için bir havluya veya beze, bir çekice ve düz uçlu (standart) bir tornavidaya ihtiyacınız vardır.

- 1 Şarj edilebilir pilin şarjını boşaltmak için, gövdeyi şarj cihazından çıkarın, Philips Sonicare'i açın ve durana kadar çalışmasına izin verin. Philips Sonicare artık açılmayana kadar bu adımı tekrarlayın.

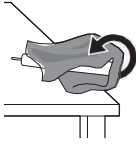


- 2 Fırça başlığını çıkarın ve atın. Tüm gövdeyi bir havlu veya bezle sarın.

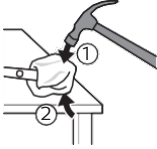


- 3 Bir elinizle gövdenin üst kısmını tutun ve alt ucun 0,5 inç yukarıdaki gövde muhafazasına vurun. Uç kapağı çıkarmak için 4 taraftan bir çekiçle sıkıca vurun.


Not: Dahili geçmeli bağlantıları kırmak için uca birkaç kez vurmanız gerekebilir.

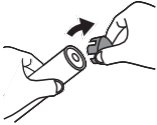


- 4 Uç kapağı dış fırçasının gövdesinden çıkarın. Uç kapak muhafazadan kolayca ayrılmıyorsa uç kapak çıkana kadar 3. adımı tekrarlayın.

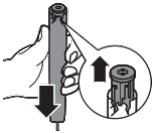

- 5 Gövdeyi baş aşağı tutarak, sert bir yüzeyde aşağı doğru baskı uygulayın. Dahili bileşenler muhafazadan kolayca ayrılmıyorsa dahili bileşenler çıkana kadar 3. adımı tekrarlayın.

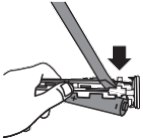


- 6 Tornavidayı pil ile dahili bileşenlerin altındaki beyaz çerçeve arasına sıkıştırın. Ardından beyaz çerçevenin altını kırmak için tornavidayı pilden çekin.

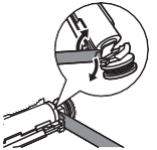


- 7 Pili yeşil baskılı devre kartına bağlayan metal tırnağı kırmak için tornavidayı pilin altı ile beyaz çerçeve arasına sokun. Bu, pilin alt ucunu çerçeveden çıkaracaktır.

20 Türkçe

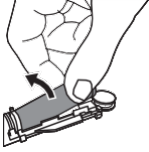

- 8 Pili tutun ve ikinci metal pil tırnağını kırmak için dahili bileşenlerden çekin.

Dikkat: Parmaklarınızın yaralanmasını önlemek için pil tırnaklarının keskin kenarlarına dikkat edin.

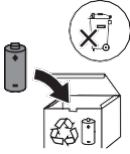

- 9 Pilin içinde kalmış olabilecek şarjdan kaynaklanan herhangi bir elektrik kısa devresini önlemek için pil temas noktalarını bantla kapatın. Şarj edilebilir pil artık geri dönüştürülebilir ve ürünün geri kalanı uygun şekilde imha edilebilir.